


РЕДМОНД

Зубная щетка TB4602

Руководство по эксплуатации

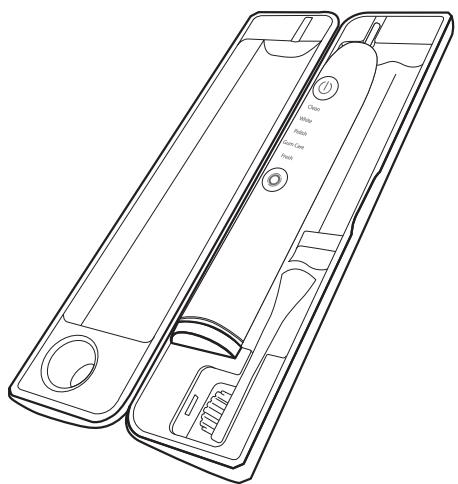

Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания



УВАЖЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД. РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Зубная щетка TB4602 – современный прибор, предназначенный для очистки полости рта.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

⚠ Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Громмешленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Не противягивайте кабель USB-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, утлами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля USB-C может привести к неподъемкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните чехол и кабель USB-C вдали от воды. **НЕ МОЧИТЕ!**

• Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.

• При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью данного прибора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.

• Зубная щетка – это предмет личной гигиены. Чтобы избежать риска переноса инфекции, не пользуйтесь одной щеткой с кем-то другим.

• Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Стого следуйте инструкции по очистке.

• Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	TB4602
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Емкость аккумулятора	2200 мАч
Номинальное напряжение чехла	5 В
Номинальная мощность чехла	2,8 Вт
Защита от поражения электротоком	класс III
Корпус прибора	пластик
Частота движений в минуту	29 000 – 42 000
Количество режимов работы	5
Время непрерывной работы	6,4 ч
Время полной зарядки	9 ч от чехла
Тип управления	электромеханический
Индикация	светодиодная
Функция памяти (запоминание последнего режима)	есть
УФ-стерилизация	есть
Чехол снабжен встроенной УФ-лампой, которая помогает очищать зубную щетку от микробов и аллергенов, а также удаляет остатки запахов.	
С помощью кабеля USB-C подключите чехол к внешнему источнику питания. Поместите зубную щетку на насадку в чехол (см. схему A1) и закройте крышку, загорится ультрафиолетовая лампа. Процесс стерилизации занимает 10 минут. При необходимости прервать процедуру откройте крышку чехла. По окончании стерилизации УФ-лампа автоматически отключается. Для того, чтобы провести процедуру повторно, откройте, а затем закройте крышку чехла.	
Установка и смена насадок	
В комплект поставки прибора входят 2 стандартные насадки с защитными колпачками.	
Насадка очищает зубы и десны от налета и остатков пищи, осуществляет массаж десен, улучшая их кровообращение.	
Колпачок защищает насадку зубной щетки от попадания влаги и предотвращает оседание вредоносных бактерий, присутствующих в воздухе.	
Не пользуйтесь насадкой со смытами или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку для зубной щетки каждые три месяца или чаще, если появились признаки износа.	
Используйте только те насадки, которые входят в комплектацию или рекомендованы производителем, чтобы избежать выхода прибора из строя.	
Перед установкой и сменой насадок убедитесь, что прибор выключен!	
Установите насадку для зубной щетки на приводной вал, так, как показано на схеме A2.1. Убедитесь, что она зафиксирована. Чтобы снять установленную насадку, потяните ее вверх.	
STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться прибором без установленной насадки!	

Устройство модели А1

- Корпус прибора
- Насадка для зубной щетки
- Запасная насадка с защитным колпачком
- Приводной вал
- Чехол для хранения и зарядки
- Кабель USB-C
- Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Комплектация

Зубная щетка

Стандартная насадка для зубной щетки с защитным колпачком

Чехол для хранения и зарядки

Кабель USB-C

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните чехол и кабель USB-C вдали от воды. **НЕ МОЧИТЕ!**

• Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.

• При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью данного прибора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.

• Зубная щетка – это предмет личной гигиены. Чтобы избежать риска переноса инфекции, не пользуйтесь одной щеткой с кем-то другим.

• Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Стого следуйте инструкции по очистке.

• Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка прибора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. С помощью кабеля USB-C подключите чехол к внешнему источнику питания и поместите в него щетку (см. схему A1). Во время зарядки индикаторы режимов работы будут поочередно загораться красным цветом. Индикатор уровня зарядки будет гореть красным цветом постоянно. Время полной зарядки составляет 9 часов.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните чехол и кабель USB-C вдали от воды. **НЕ МОЧИТЕ!**

• Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.

• При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью данного прибора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.

• Зубная щетка – это предмет личной гигиены. Чтобы избежать риска переноса инфекции, не пользуйтесь одной щеткой с кем-то другим.

• Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Стого следуйте инструкции по очистке.

• Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните чехол и кабель USB-C вдали от воды. **НЕ МОЧИТЕ!**

• Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.

• При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью данного прибора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.

• Зубная щетка – это предмет личной гигиены. Чтобы избежать риска переноса инфекции, не пользуйтесь одной щеткой с кем-то другим.

• Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Стого следуйте инструкции по очистке.

• Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните чехол и кабель USB-C вдали от воды. **НЕ МОЧИТЕ!**

• Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.

• При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью данного прибора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.

• Зубная щетка – это предмет личной гигиены. Чтобы избежать риска переноса инфекции, не пользуйтесь одной щеткой с кем-то другим.

