


РЕДМОНД

Массажер перкуссионный BM7203

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

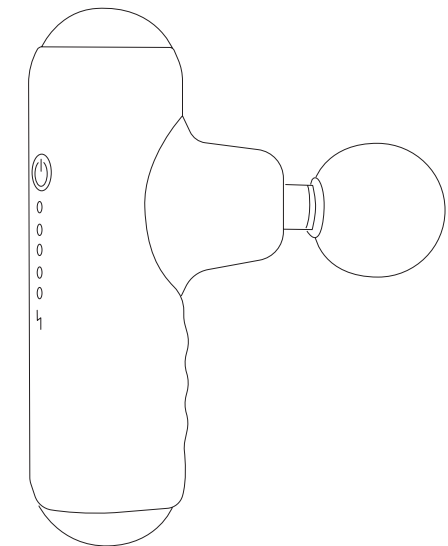

Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Массажер перкуссионный BM7203 — это современное устройство для интенсивного ударного массажа различных частей тела.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.


Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине. **Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
 - Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое целевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
 - Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
 - Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
 - Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличаящихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
 - Не протягивайте кабель USB-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля USB-C может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

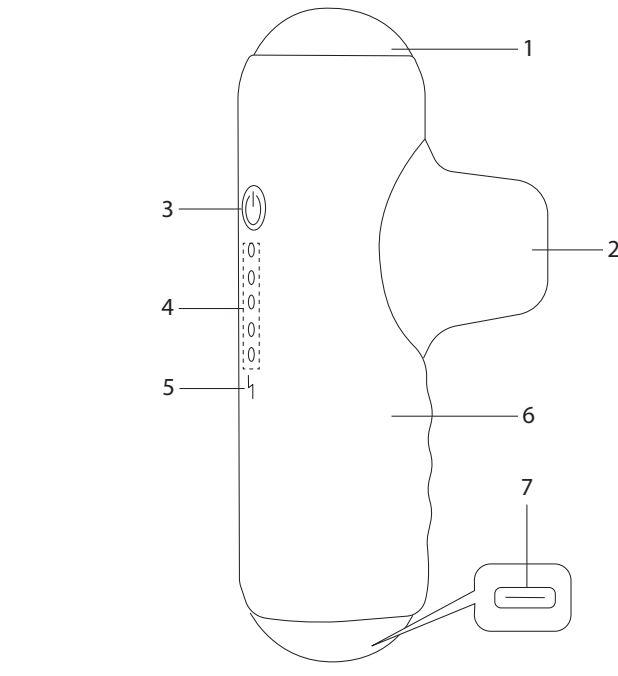

- Для предотвращения риска травм или материального ущерба перед помещением на любую поверхность всегда отключайте устройство.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не является медицинским средством и предназначен для использования только в профилактических целях. **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем использовать прибор проконсультируйтесь с врачом!
- Запрещено использование прибора при нарушении целостности кожных покровов в месте воздействия, а также на чувствительной коже, опухших и воспаленных участках (травмы, ожоги, ушибы, свежие татуировки и др.).
- Запрещено использовать прибор при нарушении чувствительности кожных покровов (трофические нарушения кожи, повреждения нервов спинного или головного мозга, сахарный диабет и др.).
- Запрещено использовать прибор при заболеваниях и приеме лекарственных средств, вызывающих нарушение кровообращения, а также заболеваниях вызывающих расширение вен, тромбозе, тромбозе, ярко выраженной отечности и т.д.
- Запрещено использовать прибор при острых инфекционных и воспалительных заболеваниях, повышенной температуре, лихорадочных состояниях и т.д.
- Запрещено использовать прибор при онкологических заболеваниях любой локализации.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор на таких частях тела, как голова, лицо, горло, костные выступы (позвоночник и др.), суставы, область сердца, а также половые органы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора и кабель USB-C в воду или помещать под струю воды!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель..... BM7203
Аккумулятор литий-ионный 7,4 В==, 1500 мА·ч
Тип мотора постоянного тока
Защита от поражения электротоком класс III
Материал корпуса пластик, силикон
Тип управления электромеханический
Количество насадок..... 4

Количество скоростей..... 5
Амплитуда 12 мм
Минимальная скорость удара 1900 об/мин
Максимальная скорость удара 3000 об/мин
Время работы от аккумулятора до 8 ч
Время полной зарядки до 2,5 ч
Таймер автоотключения 10 мин
Уровень шума..... до 50 дБ
Габаритные размеры (Ш × В × Г) 74 × 151 × 74 мм
Вес нетто..... 320 г
Длина кабеля USB-C..... 0,45 м

Комплектация

Массажер..... 1 шт.
Насадка-шар..... 1 шт.
Насадка плоская 1 шт.
Насадка-вилка 1 шт.
Насадка точечная 1 шт.
Кабель USB-C..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон..... 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема A1)

- Корпус прибора
- Держатель для массажных насадок
- Кнопка — включение/выключение прибора, выбор скорости работы
- Индикаторы скорости
- Индикатор заряда
- Ручка
- Разъем для подключения кабеля USB-C
- Кабель USB-C
- Насадка-шар
- Насадка плоская
- Насадка-вилка
- Насадка точечная

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!


После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте кабель USB-C. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка аккумулятора

Для зарядки прибора используйте блок питания (приобретается отдельно), рассчитанный на потребляемую мощность прибора (не менее 5 В, 2 А). Несоответствие параметров может привести к некорректной работе прибора.

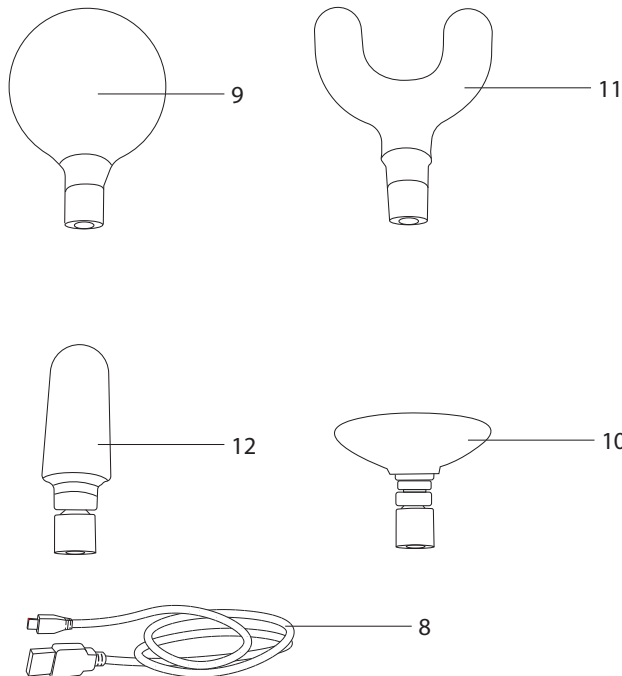

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. С помощью кабеля USB-C подключите прибор к внешнему источнику питания, загорится индикатор заряда. Процесс зарядки аккумулятора будет отображаться на индикаторах скорости. Время полной зарядки аккумулятора составляет до 2,5 часов.

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор для продления срока его службы.

Если заряд аккумулятора опустится ниже 30%, индикатор заряда будет гореть красным.

Использование

Благодаря различным насадкам массажер может проработать разные группы мышц.

НАСАДКА-ШАР подходит для воздействия на большие группы мышц спины, груди, ног	
НАСАДКА-ВИЛКА подходит для расслабления шейного отдела позвоночника, плеч и ахиллового сухожилия	
ПЛОСКАЯ НАСАДКА подходит для разогрева и расслабления мышц всего тела	
НАСАДКА ТОЧЕЧНАЯ подходит для воздействия на глубокие ткани, стопы и ладони	

- Установите выбранную насадку. **Устанавливайте и снимайте насадку с прибора, только когда тот выключен. ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться подвижной части устройства во время его работы.**
- Нажмите и удерживайте кнопку —, прибор начнет работу на первой скорости. **ВНИМАНИЕ!** Начинайте использование массажера с 1 или 2 скорости работы. Внимательно следите за реакцией организма на массаж. После нескольких процедур массажа на небольшой скорости, вы можете попробовать увеличить скорость.
- Нажимая кнопку —, установите необходимую скорость работы массажера. Количество горящих индикаторов укажет на выбранный уровень скорости. Переключение осуществляется по кругу. **По достижении максимальной скорости при дальнейшем нажатии кнопки — прибор выключится.**
- Не оказывайте чрезмерное давления на массажер при работе, чрезмерная нагрузка может повредить прибор.
- По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку —. Прибор выключится.
- Прибор оснащен таймером автоматического отключения через 10 минут непрерывной работы.

A1

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора и насадки влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или зубок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Индикатор заряда мигает	Сработал таймер автоотключения	Прибор автоматически отключается через 10 минут непрерывной работы
Прибор отключился	Кабель USB-C подключен некорректно	Убедитесь, что кабель USB-C подключен корректно
Аккумулятор прибора не заряжается	Кабель USB-C неисправен	Замените кабель USB-C на исправный
	Внешний источник питания неисправен	Подключите прибор к другому источнику питания
Во время работы прибора появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (кабель USB-C и т.д.). Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль...12 — декабрь) 2 — год производства (21 — 2021 г., 22 — 2022 г. ...30 — 2030 г.) 3 — серийный номер модели												

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

