



СИЛА ВАШЕГО ТЕЛА

BODYKRAFT

www.bodykraft.ru

Массажная накидка

Модель **K-51 BK**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики	22
Комплектация	22
Устройство модели	23

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Назначение массажной накидки	25
Показания к применению	26
Эффект от применения	27

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

28

IV. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования по технике безопасности	31
Противопоказания	31

V. ОЧИСТКА И УХОД

32

VI. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ НАКИДКА K-51 BK

Число массажных элементов	6
(2 большие массажные головки, каждая - с 3-мя малыми)	
Число вибромоторов	3
Число массажных программ	9
Функция нагрева с подсветкой	+
Вибромассаж на сиденье	+
Роликовый массаж	+
Пульт ДУ	+
Таймер (автоотключение через 15 мин)	+
Регулировка силы вибрационного массажа	3 уровня
Съемная накидка на спинке	+
Возможность использования в автомобиле	+
Демонстрационный режим Demo	+
Материал обшивки	заменитель кожи
Размер накидки	66x40x15
Вес	3,3 + адаптер 0,4 кг
Напряжение питания	220-240/12 В
Мощность	24 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажная накидка с пультом управления — 1 шт
Съемная накидка на спинке — 1 шт
Адаптер 220 В — 1 шт
Адаптер 12 В — 1 шт
Инструкция — 1 шт
Сервисная книжка — 1 шт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ





НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Массажная накидка BODYKRAFT является универсальным лечебно-профилактическим средством, способствующим укреплению здоровья.

Накидка предназначена для поддержания высокого уровня функционального состояния организма, повышения общего тонуса, улучшения деятельности всех его органов и систем, профилактики заболеваний и реабилитации организма в период выздоровления, улучшения самочувствия, повышения работоспособности.

Массаж расслабляет и укрепляет мышцы спины, улучшает кровообращение, обменные процессы в тканях. Массаж

рефлексогенных зон спины оказывает благотворное воздействие на работу внутренних органов.

Вибрационный массаж ягодичных и бедренных мышц способствует профилактике заболеваний органов малого таза. Основное предназначение массажера - это профилактический массаж. Применение массажера с лечебной целью может проводиться только по назначению врача.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- функциональные нарушения нервной системы, переутомление, бессонница, повышенная раздражительность, утомляемость и т.д.
- мышечные боли и спазмы в спине и суставах, возникающие после чрезмерных физических нагрузок, дегенеративно-дистрофических изменений вследствие сидячего образа жизни и возрастных изменений опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондрозы).
- некоторые заболевания нервной системы (невралгия, невриты, радикулиты).
- атрофия мышц, миозиты, туго-

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

подвижность суставов, возникающие вследствие хронических воспалительных процессов, артритов и травм.

- нарушения кровообращения, выражающиеся в возникновении венозного и капиллярного застоя и проявляющиеся как онемения рук и ног, отеки и появление чувства тяжести в конечностях.
- нарушения моторики желудочно-кишечного тракта, снижение кожно-мышечного тонуса.

- стимулирует кровообращение, лимфодренаж и трофику тканей.
- улучшает обмен веществ, гибкость сосудов, состояние кожного покрова.
- активизирует восстановительные процессы в организме, устраняет застойные явления.
- повышает мышечный тонус и подвижность суставов.
- нормализует работу внутренних органов, укрепляет иммунную систему.
- облегчает боли в мышцах, снимает чувство усталости, повышает работоспособность и внимание на дороге.
- ускоряет регенерацию поврежденных тканей, что способс-

твует восстановлению после ушибов, травм и переломов.

- улучшает состояние при хронической усталости, депрессии, стрессе и бессоннице.
- предотвращает развитие простатита, геморроя у мужчин и заболеваний органов малого таза у женщин.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эргономичный дизайн и передовые инженерные решения позволяют использовать массажную накидку как в автомобиле, так и в домашних условиях.

ШАГ 1

Аккуратно извлеките массажер из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки. Протрите влажной тканью поверхность накидки, после чего - просушите.

ШАГ 2

Расположите накидку на кресле и закрепите ее на спинке с помощью ремней. Накидка должна располагаться ровно, без перекосов.

ШАГ 3

Выберите необходимый адаптер (220 В в помещении или 12 В в автомобиле), подключите его к питающей сети.

ВНИМАНИЕ! При первом использовании массажной накидки происходит автоматическое разблокирование внутренней системы массажера, которое сопровождается характерным звуком (щелчком). Этот звук не является признаком неисправности и не затрагивает функциональную часть устройства.

ШАГ 4

Сядьте в удобной позе, держите спину прямо, плотно прижатой к спинке накидки. С помощью пульта управления включите массажную накидку и выберите необходимый режим работы.

Роликовый массаж с функцией нагрева:

- всей спины
- верхней части спины
- нижней части спины

Комбинированный массаж:

- роликовый в сочетании с вибрацией различной интенсивности.

Через 15 минут работы массажная накидка автоматически отключится. Помните, что максимальное время непрерывной работы массажера не должно превышать 30 минут.


ВНИМАНИЕ!

Массажную накидку в горизонтальном положении запрещено использовать людям весом тела более 90 кг.

Максимальный вес = 90 кг



BODYKRAFT

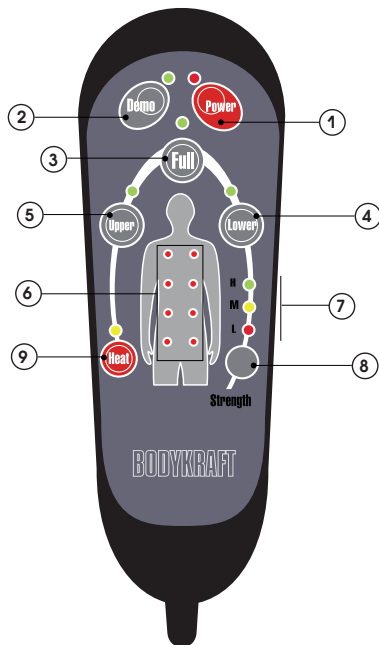

1. POWER – включение/отключение массажной накидки.
2. DEMO – включение/отключение демонстрационного режима работы.
3. FULL – режим, обеспечивающий массаж всей спины.
4. LOWER – режим, обеспечивающий массаж нижней части спины.
5. UPPER – режим, обеспечивающий массаж верхней части спины.
6. Индикация области массажа
7. Индикация выбора силы массажа
H – максимальная сила массажа
M – средняя сила массажа
L – минимальная сила массажа
8. STRENGTH – выбор силы массажной нагрузки.
9. HEAT – включение/отключение режима нагрева.

ВНИМАНИЕ! В режимах FULL, LOWER, UPPER световые индикаторы, расположенные в спинке массажной накидки, горят голубым светом. При включении функции нагрева HEAT световые индикаторы горят желтым светом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием массажера внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните эту инструкцию, гарантийный талон и упаковку.
- Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в помещении соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Не располагайте прибор вблизи источников высокой температуры, под воздействием солнечного света. Не помещайте прибор в воду.
- Запрещена эксплуатация прибора с разобранным корпусом, а также при наличии поврежденных шнура, вилки и других деталей.
- Отключайте прибор от сети перед очисткой, а также в случае, если Вы не пользуетесь им продолжительное время.
- Запрещен самостоятельный ремонт прибора.
- Используйте прибор только в положении сидя, избегайте чрезмерного давления на массажные

поверхности – это может привести к поломке массажера.

- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции по безопасной эксплуатации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые воспалительные процессы, высокая температура.
- Кровотечения и предрасположенность к ним.
- Опухоли различной локализации.
- Некоторые заболевания кожи, гнойные процессы.
- Воспаления лимфатических узлов и сосудов.
- Психические заболевания с чрезмерным возбуждением.
- Острые респираторные заболевания (ОРЗ).
- Нарушения работы кишечника тракта (тошнота, рвота, жидкий стул).

ВНИМАНИЕ!

Массаж должен быть приятным и комфортным. Если процесс массажа доставляет Вам сильный дискомфорт и Вы испытываете неприятные ощущения или боль, проконсультируйтесь с врачом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Запрещается использовать накидку для массажа травмированных, вздутых или воспаленных зон.
- Во время беременности перед проведением массажа необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не рекомендуется пользоваться массажером непосредственно после физических нагрузок или сильного переутомления.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите массажер от сети.
- Используйте для очистки корпуса массажера спиртосодержащие растворы и мягкие салфетки или ватные диски. Запрещено применять химические растворители, бензин, абразивные средства и металлические щетки.
- Не погружайте массажер, а также пульт дистанционного управления в воду и прочие жидкости.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами или не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплексность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали, лампочки и т.п. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для

данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Разработано BODYKRAFT INDUSTRIAL, USA. Изготовлено по заказу и под контролем BODYKRAFT INDUSTRIAL, USA.

Страна-производитель: Китай.





